

HOLOGIC®

Presentamos la Próxima Generación de **NovaSure®**

NovaSure V5

Ablación endometrial



DE CONFIANZA



INNOVADOR



DISEÑO ORIENTADO
A LAS NECESIDADES
DE LA PACIENTE



DE CONFIANZA

Más de 20 años de datos clínicos
Satisfacción de la paciente del 97 %²
Índice de amenorrea del 75 % a los 5 años³
Se evita la histerectomía en el 86 % de las pacientes a los 10 años⁴




INNOVADOR

Más de 3 millones de procedimientos realizados en todo el mundo que han impulsado mejoras de diseño continuas a lo largo de los años basadas en los comentarios de los usuarios.



DISEÑO ORIENTADO A LAS NECESIDADES DE LA PACIENTE

Indicado para una amplia variedad de anatomías uterinas y cervicouterinas únicas gracias a características mejoradas.

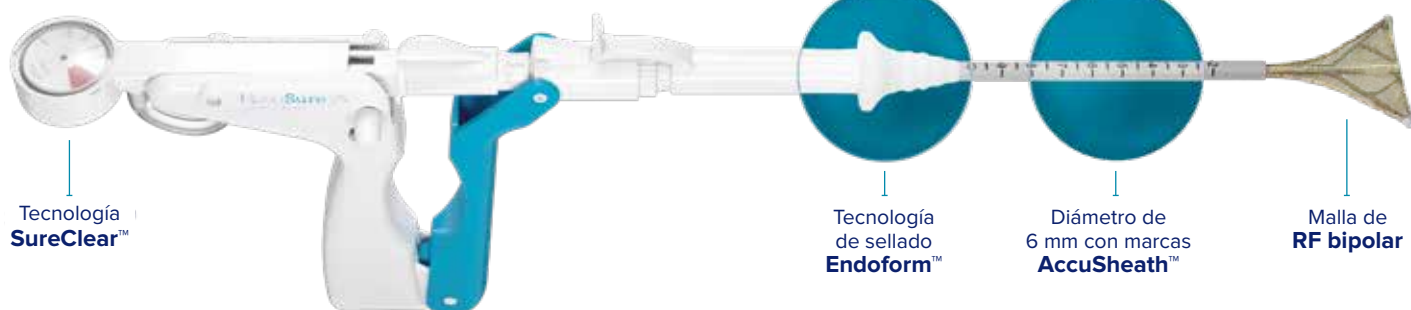

Tecnología SureClear™

El exclusivo sistema de eliminación de líquidos con tecnología SureClear de Hologic proporciona aspiración integrada a través de la malla mediante contacto constante con el tejido y, al mismo tiempo, elimina el vapor, la sangre y restos de endometrio.

Tecnología de sellado Endoform™

El cierre cervicouterino NovaSure® V5 integra la tecnología Endoform, diseñada para adaptación a diversos canales cervicouterinos y variaciones anatómicas.

Marcas AccuSheath™

NovaSure V5 incluye una vaina con un diámetro exterior de 6 mm con marcas AccuSheath, diseñadas para aumentar la precisión y fiabilidad en el asentamiento y la colocación del dispositivo.

Malla de RF bipolar

Energía de radiofrecuencia bipolar rápida y controlada que se personaliza de acuerdo con las mediciones de la cavidad uterina de la paciente.



La tecnología **SmartDepth™** monitoriza y mide de forma continua la impedancia del tejido a fin de garantizar una profundidad de ablación personalizada para cada paciente.

NovaSure V5
Ablación endometrial



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS NOVASURE V5

NÚMERO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
NSV5-003	Dispositivo desechable de ablación endometrial NovaSure V5 (paquete de 3)
NSV5-001	Dispositivo desechable de ablación endometrial NovaSure V5 (paquete de 1)

CE 2797 EC REP Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Bélgica

REFERENCIAS

¹ Conforme a datos comerciales de Hologic Inc. (unidades enviadas entre 2004 y 2018)

² Baskett TF, Clough H, Scott TA. NovaSure bipolar radiofrequency endometrial ablation: report of 200 cases. Journal of Obstetricians and Gynecologists Canada. 2005;27(5):473–476.

³ Gallinat A. An impedance-controlled system for endometrial ablation: Five-year follow up on 107 patients. J Reprod Med. 2007; 52:467-472

⁴ Herman M, Penninx J, Mol B, Bongers M. Ten-year follow-up of a randomised controlled trial comparing bipolar endometrial ablation with balloon ablation for heavy menstrual bleeding. BJOG 2013;120:966–970

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD El sistema de ablación endometrial NovaSure® está indicado para mujeres premenopáusicas con hemorragia menstrual abundante por causas benignas y que han completado su etapa reproductiva. Después del procedimiento NovaSure, el embarazo puede ser peligroso. El procedimiento NovaSure no está indicado en mujeres con diagnóstico confirmado o sospecha de cáncer uterino, con una infección genital, urinaria o pélvica activa o portadoras de un DIU. La ablación endometrial mediante NovaSure no es un procedimiento de esterilización. Sus riesgos, infrecuentes pero graves, son, entre otros, lesión térmica, perforación e infección. Los efectos secundarios temporales pueden incluir calambres, náuseas, vómitos, leucorrea y oligometrorragia. Indique a las pacientes que se pongan en contacto con usted si experimentan un posible efecto secundario relacionado con el uso de este producto. Si sospecha que usted o alguien que conoce puede haber sufrido efectos secundarios al usar nuestro producto, comuníquese al médico.

SS-01364-IBR-ES Rev. 001 ©2023 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener información específica sobre los productos que se comercializan en un determinado país, póngase en contacto con su representante local de Hologic. Hologic, AccuSheath, EndoForm, NovaSure, SmartDepth, SureClear y sus logotipos asociados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información va dirigida a profesionales médicos y no se ha desarrollado como oferta o promoción del producto en los lugares donde estén prohibidas dichas actividades. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, publicaciones electrónicas y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares donde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos que se comercializan en un determinado país, póngase en contacto con su representante local de Hologic. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Hologic o escriba a euinfo@hologic.com